



SYSTÈME DE PESAGE INTÉGRÉ

Pesée précise dans toutes les positions du lit

Systeme de pesage intégré Haelvoet

Le système de pesage intégré dans le lit Nora de Haelvoet permet de déterminer le poids du patient en toute sécurité, sans devoir adapter la position du sommier.

Il aide le personnel soignant dans le suivi clinique sans interrompre le flux de travail.



01. PRÉCISION DE MESURE RÉELLE JUSQU'À 100 G

Pas seulement visible à l'écran, mais également une précision effective

Tous les systèmes de pesage affichant 0,1 kg ne mesurent pas nécessairement avec une précision de 0,1 kg.

Le système de pesage intégré du lit Nora mesure réellement avec une précision de 100 g.

Cela signifie que le poids peut non seulement être affiché par incréments de 100 g, mais aussi mesuré avec cette précision.

Exemple : précision de 100 g

Si le système affiche 70,0 kg, le poids réel se situe entre 69,9 kg et 70,1 kg.

Certains systèmes ont une précision de 500 g. Ils peuvent afficher temporairement des valeurs par 100 g, sans garantir une telle précision.

Exemple : précision de 500 g

Si le système affiche 70,0 kg, le poids réel peut se situer entre 69,5 kg et 70,5 kg.




02. MESURE CORRECTE DANS TOUTES LES POSITIONS DU LIT

Aucune reposition du patient ni adaptation de la position du lit nécessaire

Le système fonctionne différemment des systèmes classiques où les cellules de charge sont placées sous le sommier. Dans le lit Nora, elles sont intégrées dans le chariot, sous les colonnes.

Le système permet une pesée correcte indépendamment de la position du sommier:

- Réglage hauteur variable
- (Anti-)Trendelenburg
- Réglage du dossier et/ou du repose-genoux

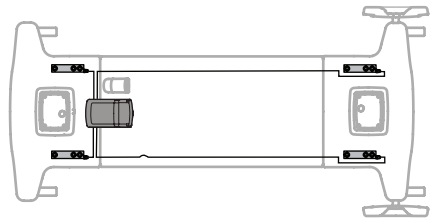

Localisation des 4 cellules de pesage intégrées dans le chariot du lit d'hôpital Nora (vue de dessus).



03. MESURE FIABLE DANS TOUTES LES SITUATIONS DE SOINS

Aucune influence des accessoires ou points de contact

Le porte-sérum est fixé sur une partie non pesée du chariot, ce qui permet d'ajouter ou de retirer des perfusions sans impact sur le poids. En outre, le panneau de tête accompagne le réglage en hauteur, évitant tout point de contact perturbateur. Même lorsque le matelas ou l'oreiller touchent le panneau de tête, la mesure reste correcte.

